

pH Neutral - Produktinformation

Beskrivelse

pH Neutral er en 2 minutters øjenskylløsning til ulykker med syrer og baser. Flaskerne er udstyret med en ergonomisk øjenkop, der sikrer, at øjenskylløvæsken rammer øjet med en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme. Plum DUO flaskerne er udstyret med en speciel øjenkop, der gør, at du kan skylle begge øjne på én gang. Øjenskylløflaskerne er CE-mærkede i henhold til de gældende regler for medicinsk udstyr, og er omfattet af Rådets Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.



Anvendelsesområde

Ved ulykker med syrer og baser gælder det om hurtigst muligt at neutralisere kemikallet til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-niveau. Ved at anvende normalt vand eller 0,9 % natriumklorid opnår du kun en fortyndings- og skylleeffekt (se figur 1 nedenfor). Der kan rekvireres yderligere dokumentationsmateriale om pH Neutrals virkning og effektivitet. Efter brugen af pH Neutral anbefaler vi at fortsætte skylningen frem til lægen med Plum Øjenskyll 0,9 % natriumklorid.

Note: Søg læge ved alle øjenskader!

VIGTIGT

Forbehold overfor Flussyre


Flussyre er en middelstærk syre, som også er giftig og kraftigt ætsende på hud og knogler. pH Neutral og Plum Øjenskyll kan neutralisere og bortskylle men ikke begrænse den ætsende effekt, og de kan derfor ikke anbefales til førstehjælp ved øjenulykker med Flussyre.

ANBEFALET BRUG AF PH NEUTRAL

pH Neutral er en 2 minutters øjenskylløsning til ulykker med syrer og baser. Skyl med pH Neutral for at bringe skadestoffets pH værdi til et uskadeligt niveau hurtigst muligt.

Fortsæt derefter skylningen med Plum Øjenskyll 0,9 % natriumklorid frem til læge eller skadestue.

Figur 1: Neutralisering af stærk base og stærk syre

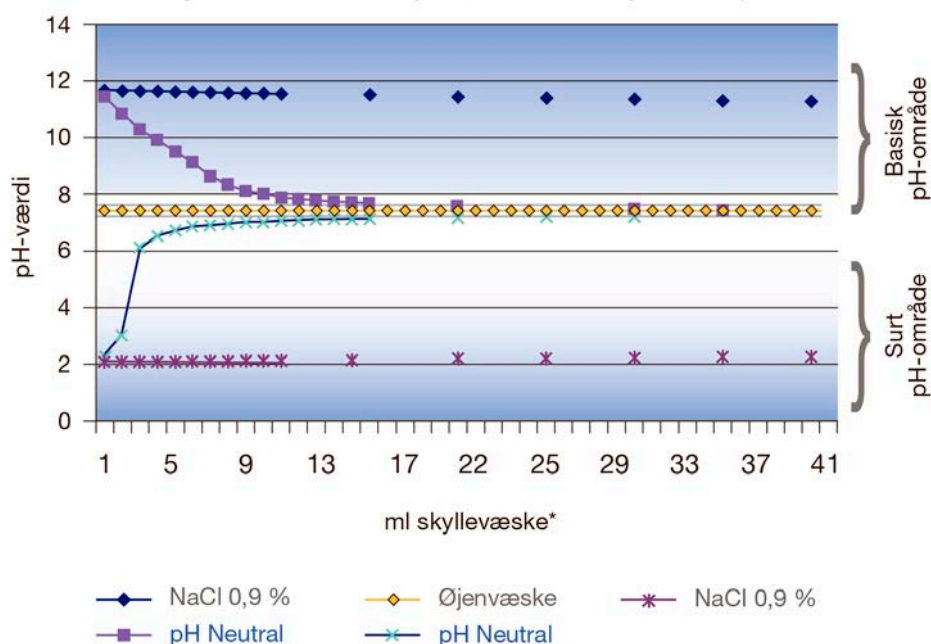

* En titreringsanalyse udført i laboratoriet (in vitro) hos Plum A/S. I testen blev pH Neutral og 0,9 % natriumklorid gradvist tilført en opløsning med 1 dråbe svovlsyre + 40 ml vand henholdsvis 1 dråbe kaliumhydroxid + 40 ml vand. Ændringen i pH-værdien og mængden af skyllevæske blev målt.

pH Neutral - Produktinformation



Dine fordele:

- Høj funktionssikkerhed – flaskerne er fremstillet i henhold til EN 15154-4
- Fleksible systemløsninger – små og store stationer til vægmontering direkte ved arbejdsstedet. Eller små mobile løsninger til at have med sig i varebilen, i værktøjs- og førstehjælpskassen eller i den specielle bæltetaske
- Bred anvendelse (f.eks. industri, laboratorier, førstehjælpskasser, mobil anvendelse i vebiler, lommer etc.)
- Enkel og hurtig anvendelse – kan anvendes af den tilskadekomme person uden assistance
- Lang holdbarhed – uåbnet er den sterile væske holdbar i 3 år
- Kræver ingen vedligeholdelse eller udskiftning af væske (som ved almindeligt vand)

Sådan anvendes flasken:



Flasken tages ud af øjenskylleboksen



Øjenkoppen drejes, til forseglingen brydes



Læn hovedet bagover og skyl



Læn dig eventuelt frem og skyl, hvis du vil undgå, at tøjet bliver vådt

Håndteringsvejledning:

Produktet kan kun anvendes én gang. Må ikke anvendes efter holdbarhedsudløb (se etiket). Anvend ikke produktet, hvis flaskens forsegling er brudt. Er forseglingen først brudt, er der ved genanvendelse risiko for infektion!

Flaskestørrelser:

Indhold	200 ml	500 ml DUO
Varenr.	4752	4801
Skylletid	ca. 2 min.	ca. 2 min.
Mål	H 165 x ø 55 mm	H 220 x ø 75 mm